

分析装置・電子カルテ連携支援システム

ECPO エクポ

「ECPO」の主な特長

分析装置のデータを自動で取り込み、電子カルテに送信

- さまざまな電子カルテ機種に対応しています。

※対応電子カルテ機種の詳細は裏面対応機種一覧をご参照ください。

複数の分析装置と接続可能

- 自動血球計数装置（裏面参照）との接続が、標準機能として搭載されているので、他の分析装置の設置とともにすぐに利用できます。
- 対応する分析装置であれば、オプション機能で接続が可能です。

※対応分析装置の詳細は裏面対応機種一覧をご参照ください。

オプション機能

- 分析装置の接続追加

分析装置は最大5台まで接続可能です。

※接続数を増やす場合、RS-232c接続端子増設用ボードまたはRS-232c-USB変換器が必要となります。

測定状況一覧

F1:依頼編集

F2:送信

F3:紐づけ

受付日

2011/09/16

F4:設定

ESC:終了

患者ID	患者氏名(カナ)	患者氏名(漢字)	CRP	血糖	Hb-A1c	尿	凝固	上位送信
010001	田中 一郎	田中 一郎	済	済	済	済	済	済
010002	鈴木 太郎	鈴木 太郎	済	済	2	済	2	未
010003	安藤 健介	安藤 健介	—	3	3	3	—	未
010004	関川 澄人	関川 澄人	3	4	4	4	—	未
010005	田中 麻紀	田中 麻紀	4	5	5	—	3	未
010006	秋山 信	秋山 信	5	6	6	5	4	未

依頼編集

検体属性入力

管理ID : 0001

患者ID

1234

患者氏名

田中 一郎

氏名(カナ)

田中 一郎

年齢

55

性別

1

測定装置選択

☐ グルコース
 ☐ 血算

クリックで依頼を選択します。

前検体

次検体

登録

No	患者ID	氏名(カナ)	血算	グルコース
1	1234	田中 一郎	済	済
2	1235	鈴木 太郎	済	—
3	1236		済	—
4	1237		済	—

測定データマッチング

確定

元に戻す


測定時間	患者ID	血算	グルコース
09:00:00	1234	[1]	
09:10:00	1235	[2]	
09:15:00	1234		[1]
09:20:00	1236	[3]	
09:30:00	1237	[4]	

取止め

復帰

閉じる

ECPOシステム構成図

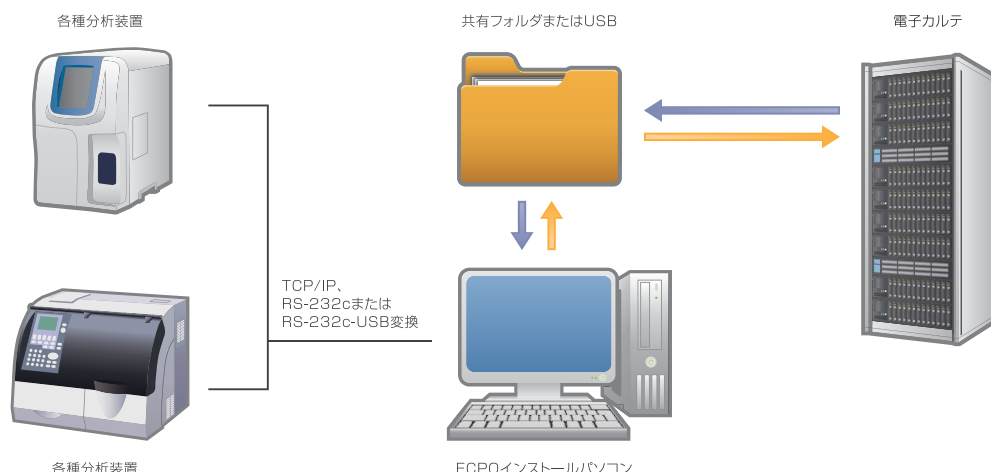

■ 運用手順

ワークシート方式 上位依頼あり

- 1 電子カルテから、分析依頼を受信します。
(必要に応じて、分析装置毎の測定順番表「ワークシート」を出力できます。)
- 2 測定順に沿って各分析装置で測定を行います。
- 3 分析装置から結果データを自動的に取り込みます。
- 4 分析結果が揃った依頼を電子カルテに結果送信します。

患者IDマッチング方式 上位依頼なし

- 1 分析装置にて患者IDを入力し、検体を測定します。
- 2 分析装置から結果データが自動的に取り込まれ、電子カルテに結果を送信します。
(患者IDがない結果データは、マッチング機能を用い、患者IDを入力します。)

対応分析装置

■ 自動血球計数装置

日本光電工業株式会社
「MEK-シリーズ」
フクダ電子株式会社
「LC-シリーズ」

■ 生化学分析装置

富士フイルム株式会社
「富士ドライケム 7000VZ」
「富士ドライケム 7000V」
「富士ドライケム 4000V」
株式会社セントラル科学貿易
「Piccolo Xpress」

■ 尿分析装置

シーメンスヘルスケア株式会社
「クリニテックスステータスプラス」

アークレイ株式会社
「ポケットケム」

※他の分析装置についてもお問合せ下さい。

対応電子カルテ

パナソニックヘルスケア株式会社
「Medicom-HRⅡ」
「Medicom-HR」
「Medicom-DP/X・Ⅲ」
「Medicom-DP/X・Ⅱ」
「Medicom-DP/X」
「Dr's Partner」

富士通株式会社
「HOPE/EGMAIN-CX」
「HOPE/Dr'note」

アイネット・システムズ株式会社
「AI-CLINIC」

株式会社ユヤマ
「Brain Box」
株式会社ラボテック
「Super Clinic」
株式会社ビー・エム・エル
「Medical Station」
株式会社メディカル イン
「RS_Base」

※その他のシステムについてもお問合せ下さい。

対応OS

Windows7 / 8 / 10

Windows 7 / 8 / 10は、米国マイクロソフト社の登録商標です。

■システム内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。 ■本誌の一部または全部を無断で複写複製(コピー)することは著作権法で禁じられています。

開発元

株式会社 サイス

〒141-0022
東京都品川区東五反田5丁目23番地1号
第2五反田不二越ビル2F
TEL : 03-5789-3030(代表) FAX : 03-5789-3033
Website : www.saice.co.jp

総発売元

フィンガルリンク株式会社

〒111-0041
東京都台東区元浅草二丁目6番6号 東京日産台東ビル5F
TEL : 03-6802-7145(代表) FAX : 03-6802-7156
E-mail : info@finggal-link.com
Website : www.finggal-link.com

販売元